Pasos para Colocarse el Sensor


Si ya tiene el equipo Dexcom, conoce las partes de éste y los pasos a realizar para que se lo pueda insertar. Importante: Si recibió bomba de insulina también, colóquese el sensor una vez conozca el día en que le colocarán su bomba de insulina.



Partes del Dexcom



- Receptor Dexcom: dispositivo donde recibirá los valores de glucosa. También puede programar su celular, descargando la aplicación de Dexcom.
- Importante: Para verificar la lista de los celulares compatibles, visite: dexcom.com/compatibility

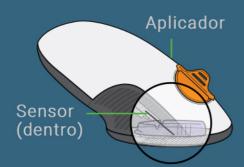

Aplicador con el sensor integrado:

- El sensor detecta sus niveles de glucosa.
- El aplicador- inserta en sensor bajo la piel.




Transmisor:

 Envía sus niveles de glucosa del sensor al dispositivo de visualización.

nazareno

Pasos para Configurar el Receptor



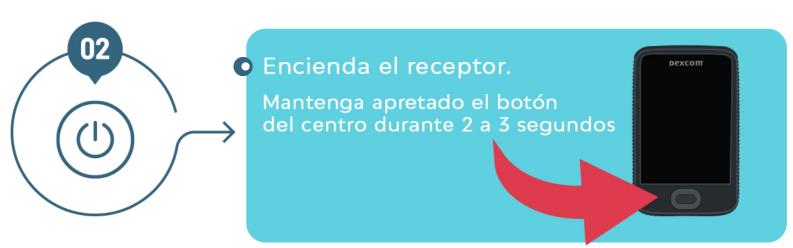



Página 3
INCIDENCIA
SERVICES

Siga las instrucciones en pantalla.

• Cuando le soliciten el código del sensor, éste se encuentra en la parte blanca del sensor.



 Cuando le soliciten el número de serie del transmisor, éste se encuentra en la parte trasera de la caja del transmisor o detrás del mismo transmisor.







Habrá terminado cuando vea esta pantalla.

Ahora es momento de insertar el sensor:

Abra la caja de los sensores. Allí encontrará tres Aplicadores. Cada uno tiene el sensor integrado. Saque uno de ellos.





Lávese y séquese las manos.
Limpie el lugar de la inserción
con una toallita de alcohol

Use el aplicador cuyo código de sensor introdujo al configurar el dispositivo de visualización


Retire las dos etiquetas sin tocar el adhesivo

Sitúe el aplicador en el lugar donde va a insertarse el sensor



Ahora es momento de colocar el transmisor



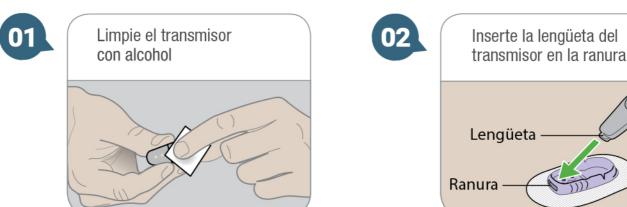













Espere hasta 30 minutos antes emparejar. Una vez salga el símbolo de cotejo, proceda a encender el sensor.





Toque Start Sensor (Iniciar sensor) para comenzar con el calentamiento.

- Durante este periodo, no recibirá las lecturas de sus glucemias.
- Mantenga el receptor a menos de 20 pies del sensor.







Espere 2 horas

- Cuando termine, toque en Next (Siguiente) para ir a la pantalla de inicio.
- A partir de este momento recibirá alarma, alertas y lecturas del G6.

